

ДЕСНЕВОЙ ТРИММЕР ДЛЯ ГИНГИВОТОМИИ




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Режущие свойства бора превосходят таковые у скальпеля
- Наконечник бора быстро нагревается при трении, в связи с чем наступает моментальная коагуляция и, как следствие, остановка кровотечения
- Поверхность бора не забивается мягкими тканями в процессе его эксплуатации
- Устойчив на излом
- Не требует охлаждения водой
- Гарантированно сохраняет свою форму в течение длительного срока эксплуатации

Конусовидная рабочая часть из специальной керамики.

Рабочая скорость – **300 000 об/мин.**

Угол наклона при работе – **45-90°.**

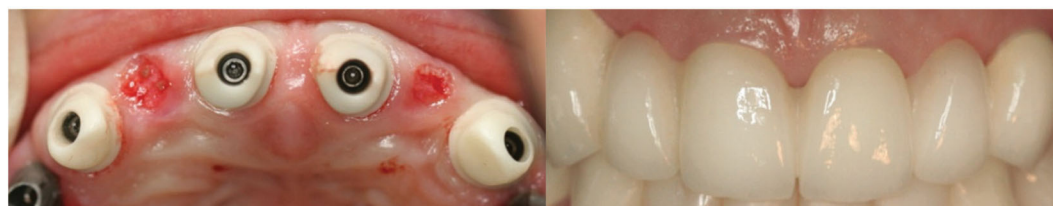

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Раскрытие зубодесневого кармана перед снятием слепка и при пародонтологическом лечении
- Обнажение кариозных полостей зуба, расположенных глубоко под десной
- Обнажение ретенированных зубов
- Раскрытие интраоссальных дентальных имплантатов
- Иссечение гипертрофированных сосочков
- Операция по моделированию слизистой оболочки полости рта
- Удаление грануляций в области десневых карманов



3970 руб.